


# Rund - Probenschneider PCE-FSC 10

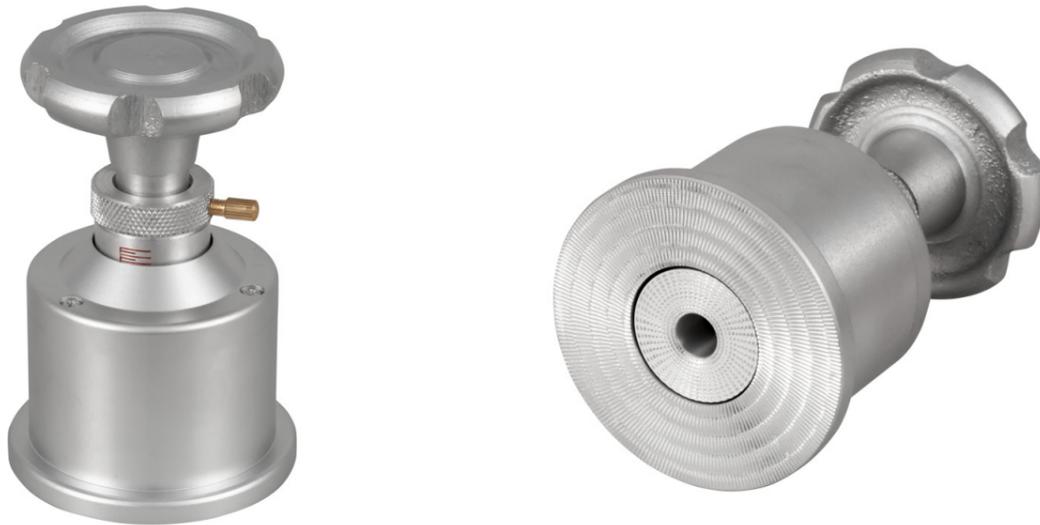

**Rund - Probenschneider für 10 cm<sup>2</sup> Proben, robust und kompakt, vier Klingen, 0-5 mm**

Der Rund - Probenschneider besticht durch seine kompakten Abmaße und das robuste Stahlgehäuse. Mittels vier innenliegenden Klingen des Rund - Probenschneider trennen Sie binnen Sekunden eine 10 cm<sup>2</sup>-Probe (Vlies, Papier, Leder, Textil, Kork,...), eine viertel Umdrehung genügt, heraus und können diese auf ihr Flächengewicht messen.

- ▶ robust und kompakt
- ▶ vier innenliegende Edelstahlklingen
- ▶ bis 0-5 mm Materialstärke
- ▶ 10 cm<sup>2</sup> Probengröße
- ▶ mit mechanischer Sperre
- ▶ für viele Materialien geeignet

## Technische Daten

Probendicke	max. 0-5 mm
Probenausschnitt	<b>10 cm<sup>2</sup></b>
Gehäuse	Stahlguss
Schneidklingen	Edelstahl
Abmessungen	126 mm, Ø 84 mm
Gewicht	ca. 500 g

## Weitere Informationen

Datenblatt



Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte



Änderungen vorbehalten!