


Magneetroerder PCE-MSR 110

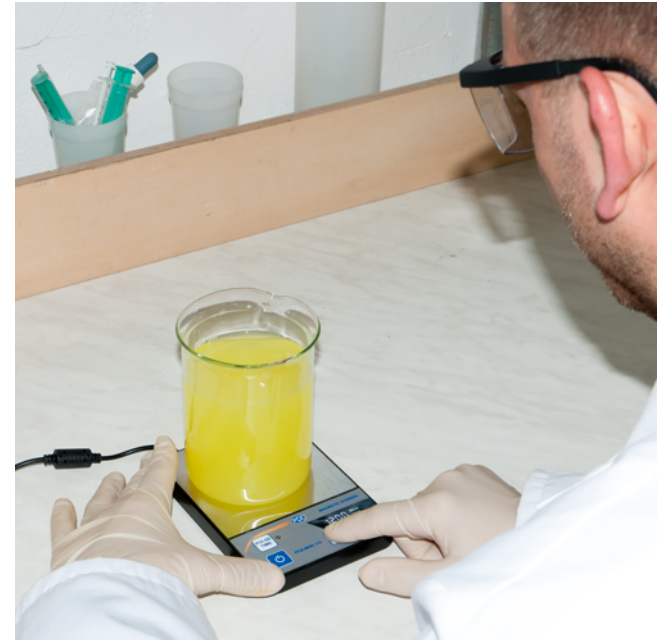

Magneetroerder PCE-MSR 110

Laboratorium magneetroerder / platte bouw / inductie / 1 Roerder tot maximaal 800 ml / IP 65 / timer / Omkeerroerfunctie / Roersnelheid tot maximaal 1.500 omwentelingen per minuut

De inductie magneetroerder PCE-MSR-110, is een platte, ruimtebesparende laboratorium magneetroerder. Door de inductie gebaseerde werkwijze is de geluidsarme werking en een plat ontwerp van de roerder mogelijk. Het roeroppervlak is ontworpen van roestvrij staal en heeft een werkgebied met een diameter van \varnothing 94 mm. Met deze laboratorium magneetroerder kan het volume van de vloeibare middelen tot maximaal 800 ml gemakkelijk, snel en veilig gemengd worden.

De roersnelheid kan aangepast worden met de universele magneetroerder PCE-MSR 110 tussen 15 en 1.500 omwentelingen per minuut. De magneetroerder PCE-MSR 110 heeft een rustige start, en gaat langzaam naar de ingestelde roersnelheid, om zo spatten te voorkomen. Het inductieve mengstation is slijtage- en onderhoudsvriendelijk. Met een geïntegreerde timer kunt u de gewenste roertijd instellen tussen 1 tot 99 minuten. De omkeerroerfunctie maakt het mogelijk om de draairichting te veranderen met een tussentijd van slechts 30 seconden.

- ▶ Plat ontwerp
- ▶ Stille en slijtagevrije aandrijving
- ▶ Timer
- ▶ Roeroppervlakte is van roestvrij staal IP65
- ▶ 1 Roerwerkgebied van \varnothing 94 mm
- ▶ Variabel in te stellen tussen 15 en 1.500 per minuut
- ▶ Voorzijde-display
- ▶ Omkeerroerfunctie

Technische gegevens

Technische specificaties

Aandrijving roerstation	Inductief
Maximale Snelheid	1.500 Omwentelingen per minuut
Instelbare timer	Van 1 minuut tot maximaal 99 minuten
Instelbare snelheid	Tussen de 15 en 1.500 omwentelingen per minuut
Snelheidsnauwkeurigheid	+/- 50 Omwentelingen per minuut
Maximale roervolume	800 ml gebaseerd op water
Omgevingsomstandigheden/veiligheid klasse	5 - 40 ° C/IP65
Afmetingen roeroppervlakte (diameter)	94 mm
Afmetingen, gewicht	120 x 164 x 12 mm, 0,4 kg
Stroomverbruik	100-230 VAC, 50-60 Hz.
Vermogen	5 W

Omvang van de levering

1x roerder, 1x magneetroerstaaf PTFE gecoat 25 x 8 mm, 1 x gebruiksaanwijzing

Meer informatie

Gebruiksaanwijzing



Meer over het product



Verwante producten



Subject to change