

Microcentrifuge PCE-CFE 100

Microcentrifuge / Zeer nauwkeurige centrifuge / Vaste hoek rotor / Adapter voor 1,5 en 2,0 ml microvaten / PCR-strips rotor / Vaste snelheid: 6.000 rpm-1

De microcentrifuge PCE-CFE 100 is een stil, robuust en voordelig hulpmiddel voor het centrifugeren van vloeistoffen. Het centrifugeren wordt uitgevoerd in PCR-buizen in microbiologische laboratoria uitgevoerd. De kleine footprint van de PCE-CFE 100 bespaart kostbare ruimte op uw bureau. Deze microcentrifuge PCE-CFE 100 wordt inclusief een vaste hoek rotor voor 1,5 / 2 ml containers voor 0.2 / 0.4 PCR-buizen en een vlinder rotor voor PCR-strips van 2 x 8 0.2 ml geleverd.

Om de warmteontwikkeling die ontstaat door wrijving van de microcentrifuge te verminderen, wordt de rotorruimte afgesloten tijdens gebruik van het apparaat. Bij het openen van de doorzichtige deksel van de rotor schakelt de elektronische rem het apparaat automatisch uit. Vier, in de rubberen bodemplaat geïntegreerde, zuignappen zorgen voor een stevige bevestiging van de microcentrifuge tijdens gebruik. De microcentrifuge PCE-CFE 100 werkt met een vaste snelheid van 6.000 rpm.



- Compact design
- Stil en trillingsarm apparaat
- Geleverd met vaste hoek- en vlinder-rotor
- Vaste snelheid van 6.000 rpm
- Zuignappen voor een stevige bevestiging
- Doorzichtige rotordeksel

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 **E:** info@pcebenelux.nl **I:** www.pcebrookhuis.nl



Technische data

Input	10 W
Rotoren	Vaste hoek rotor 8 x 1,5 / 2 ml, Adapter 0,2 / 0,4 ml, Vlinder rotor 2 x 8 x 0,2 ml
Max. toerental	Vast; 6.000 rpm
Afmetingen (HxBxD)	162 x 157 x 115 mm
Geluidsniveau bij max. aantal omwentelingen	< 55 dB

Leveromvang


1 x Microcentrifuge PCE-CFE 100 complete set





Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



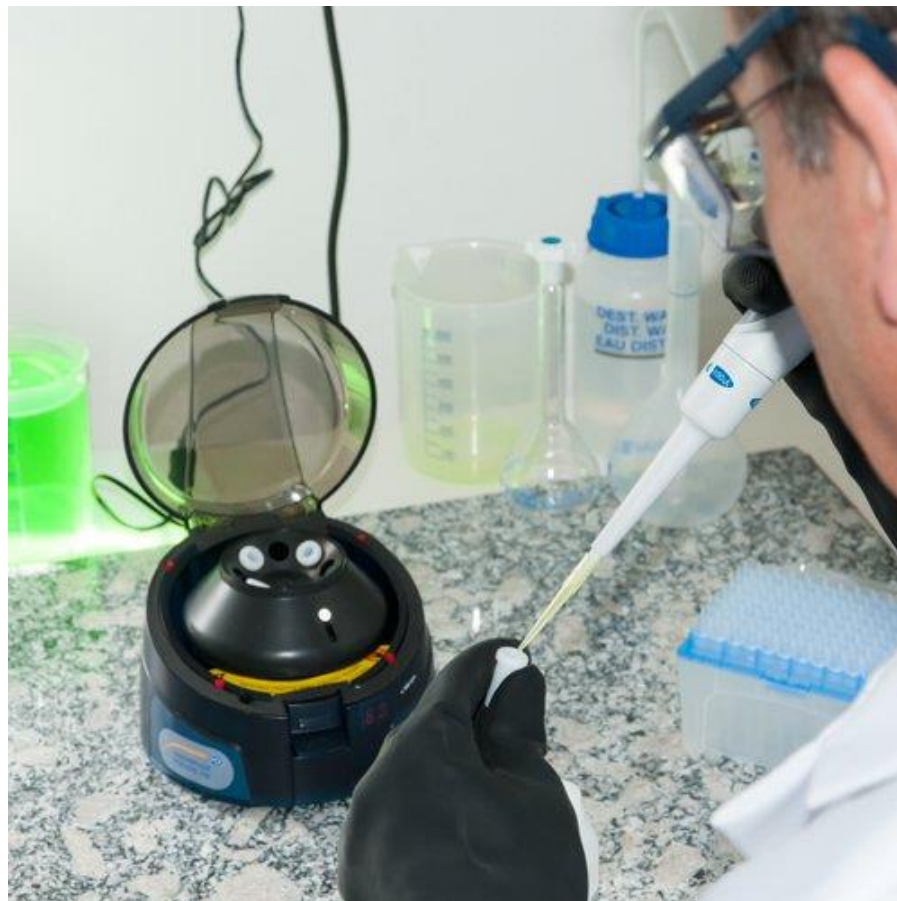

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments
PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)53 - 737 01 92 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl