

Kit de densidad PCE-AB-DB



Descripción

Medición de la densidad en combinación con una balanza

El equipo sirve para determinar la densidad de los sólidos (cuerpos sólidos). Se utiliza el principio hidrostático. La densidad es la relación del peso [g] con el volumen [cm³]. El peso se obtiene pesando el material de la prueba en el aire. El volumen se determina con el impulso [g] de una prueba de material sumergida en un líquido.

Características


Apto para las siguientes balanzas:

- PCE-ABI 120
- PCE-ABI 220
- PCE-ABI 220C
- PCE-BT 200
- PCE-LS E 320-M
- PCE-LS-I 620-M

Contenido del envío

1 x Equipo de densidad

Dimensiones

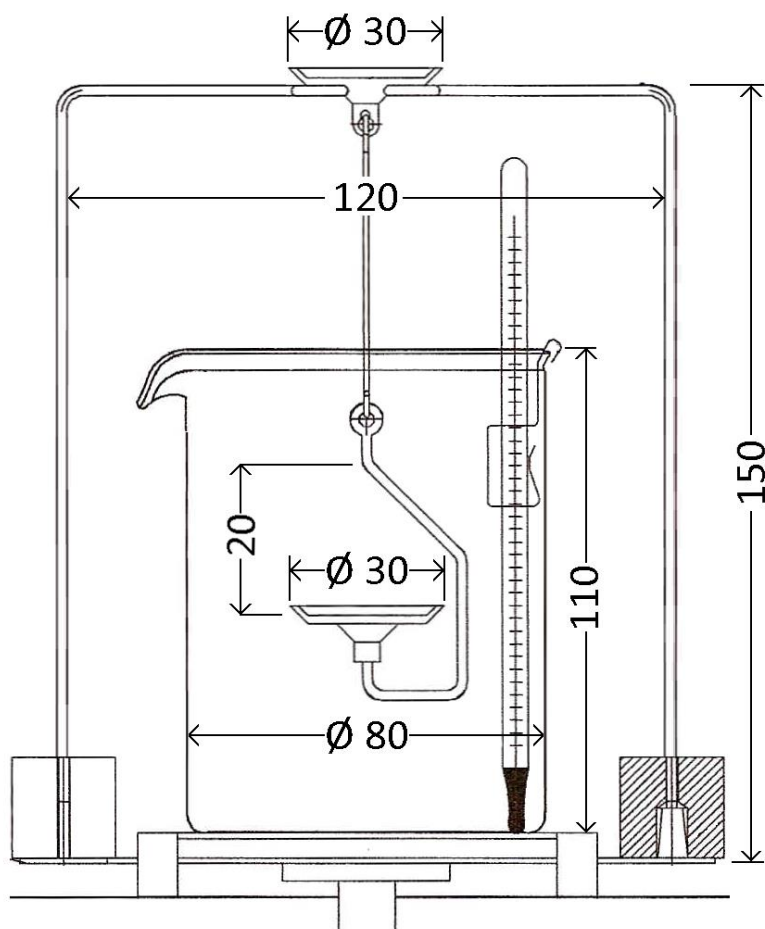

Nos reservamos el derecho a modificaciones