


# Nem Tayin Cihazı PCE-MA 100

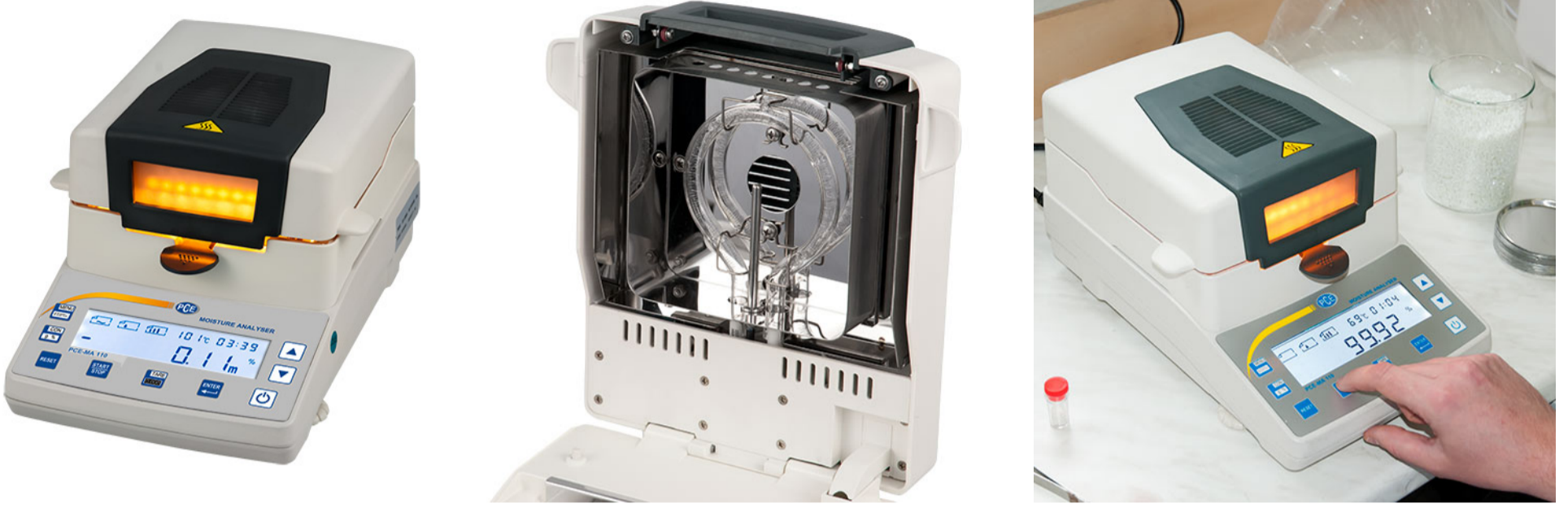

## Nem Tayin Cihazı PCE-MA 100

**110 g tartım aralığı / 1 mg / 0.001 g okunabilirlik / Nem ölçümü için ısıtma haznesi / RS-232 arayüzü / 15 kurutma programı için dahili bellek / Kalibrasyon**

Nem tayin cihazı PCE-MA 100, farklı malzemelerin tartılıp nem içeriklerinin belirlenmesini sağlar. Isıtma haznesi, halojen bir lambayla 199°C'ye kadar ısıtılır. Bu haznede, tartılacak malzeme kurutulur, ardından ağırlık farkından nem içeriği hesaplanır. 0.001 g okunabilirliği sayesinde cihaz en küçük ağırlık farkını bile belirleyebilir.

Sonuçlar, geniş LCD ekranda görüntülenir. 15 farklı kurutma programı cihazın hafızasında kaydedilebilir. PCE-MA 100, granüllerin, peletlerin, gıdaların, macunların vb. kalite kontrolü için uygundur. 100 g ağırlık ile cihaz istenildiğinde kalibre edilebilir.

- ▶ Tartım aralığı: 110 g
- ▶ Okunabilirlik: 1 mg / 0.001 g
- ▶ Nem belirlemesi için ısıtma haznesi
- ▶ RS-232 arayüzü
- ▶ 15 kurutma programı
- ▶ Ayarlanabilir kurutma sıcaklığı ve zaman
- ▶ Kullanımı kolay
- ▶ Tekrar ayarlama için kalibrasyon fonksiyonu
- ▶ 100 g kalibrasyon ağırlığı dahil
- ▶ 9 membran tuşlu geniş LCD ekran

## Teknik özellikler

Tartım Aralığı	110 g
Okunabilirlik	1 mg / 0.001 g
Isıtma Elementi	Halojen lamba
Sıcaklık Aralığı	+40 ... +199 °C
Isıtma Süresi	1 ... 199 dakika (ayarlanabilir)
Nem Ölçüm Aralığı	0 ... %100
Okunabilirlik	%0.01
Hafıza	15 kurutma programı
Arayüz	RS-232
Ekran	LCD, 9 membran tuşu
Güç Kaynağı	220 V / 50 Hz
Boyut	200 x 180 x 380 mm

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change